

## Einstellungen Kopplung zu „Romexis“ (Fa. Planmeca)

1. Voraussetzungen
2. Erforderliche Einträge in **ivoris® dent**, **ivoris® ortho**
3. Erforderliche Einträge in **ivoris® analyze**
4. Erforderliche Einträge in „Romexis“
5. Test Patientenübergabe von **ivoris® dent**, **ivoris® ortho** an „Romexis“
6. Test Patientenübergabe von **ivoris® analyze** an „Romexis“
7. Test Bildübernahme in **ivoris® analyze** über „VDDS“
8. Fehlermöglichkeiten

### 1. Voraussetzungen

- **ivoris®** muss installiert sein
- „Romexis“ und die dazugehörige VDDS-Schnittstelle müssen installiert sein

### 2. Erforderliche Einträge in **ivoris® dent**, **ivoris® ortho**

- ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird

### 3. Erforderliche Einträge in **ivoris® analyze**

- ein Eintrag ist nicht erforderlich, da die VDDS-Schnittstelle genutzt wird


### 4. Erforderliche Einträge in Romexis

- es sind keine Einträge in Romexis erforderlich


## 5. Test Patientenübergabe von ivoris<sup>®</sup> dent, ivoris<sup>®</sup> ortho an „Romexis“

- klicken Sie auf den Menüpunkt „Kopplungen“ → „VDDS media“, wählen Sie „Romexis“ und bestätigen Sie mit „OK“

VDDS-media Schnittstelle - Patientenübergabe

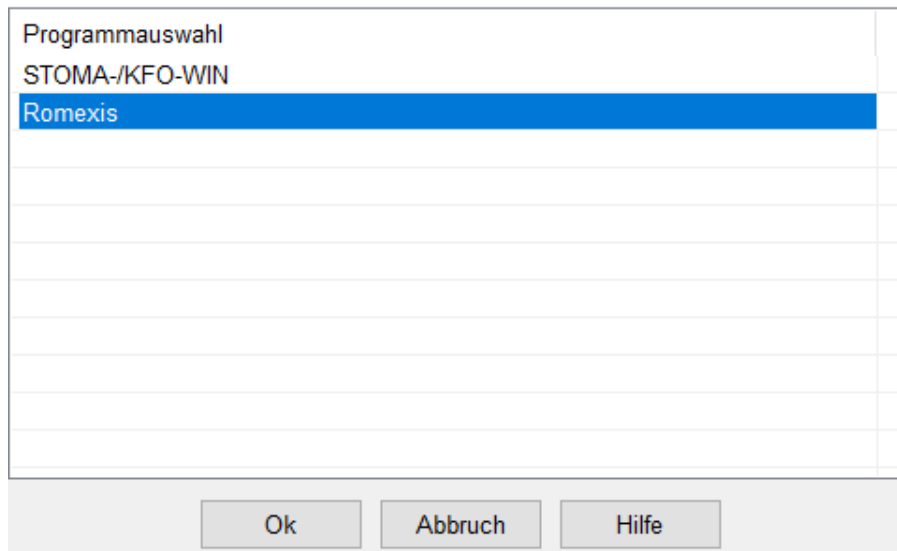

- „Romexis“ wird geöffnet und der Patient angemeldet

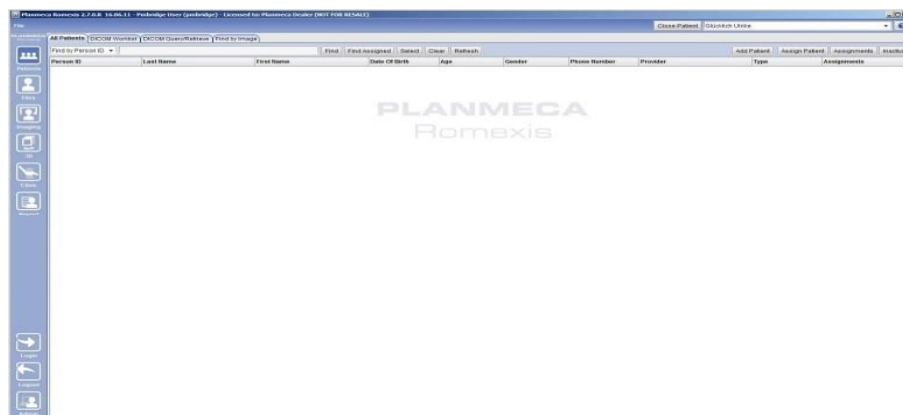

- wurden bei diesem Patienten zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese später hier wieder aufgerufen werden

## 6. Test Patientenübergabe von ivoris<sup>®</sup> **analyze** an „Romexis“

- klicken Sie auf den Röntgenschalter in der Iconleiste

Röntgenauftrag/Datenabgleich

VDDS SIDEXIS DIMAXIS DIGORA CLINIVIEW DÜRR TROPHY

Patient

Name:  Nummer:

Vorname:  geboren:

Daten übergeben an

|                |  |
|----------------|--|
| STOMA-/KFO-WIN |  |
| Romexis        |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |
|                |  |

Hilfe

Abbruch

Ok


- „Romexis“ wird geöffnet und der Patient angemeldet




- wurden bei diesem Patienten zu einem früheren Zeitpunkt Bilder abgelegt, können diese hier später wieder aufgerufen werden

## 7. Test Bildübernahme von Romexis in ivoris<sup>®</sup> analyze über „VDDS“

- das Icon „Datenverwaltung“, dort den Ordner „Bildaufnahme“ und auf der rechten Seite den „VDDS-Schalter“ wählen

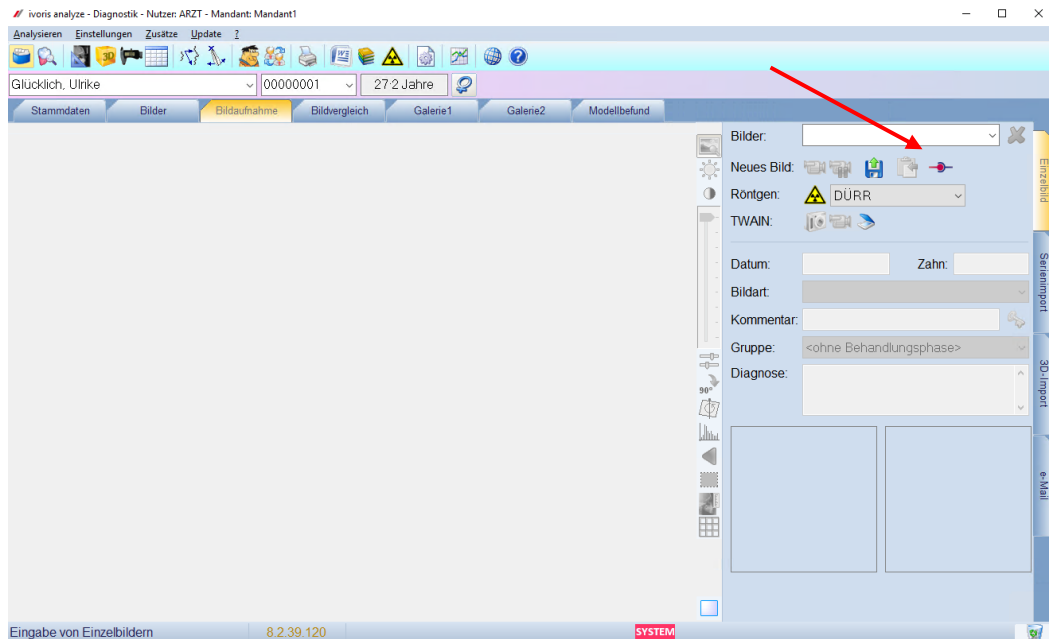

- bei Klick auf Romexis in der Liste werden die Bilder des Patienten angezeigt und können mit OK importiert werden

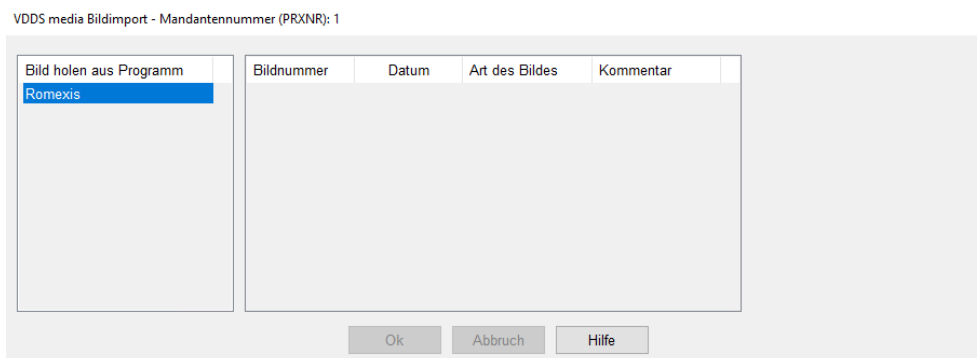

## 8. Fehlermöglichkeiten

| Fehler   | Ursache   | Lösung  |
|--|---|---|
| Röntgenshalter von <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>ortho</b> oder <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>analyze</b> ist nicht aktiv, trotz eingetragener Kopplung. | Modul „ <b>digital</b> “ wurde nicht freigeschalten.                        | Bitte mit Hotline von Computer konkret in Verbindung setzen.                                    |
| Romexis nicht als VDDSClient verfügbar in <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>analyze</b>  | Ältere Version von <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>analyze</b> wird verwendet | Update 07.01.000x installieren<br>Update <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>analyze</b> installieren |
| Romexis nicht als VDDSClient in <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>ortho</b> oder <b>ivoris</b> <sup>®</sup> <b>analyze</b> verfügbar                         | VDDS-Client von Romexis nicht installiert                                   | VDDS installieren   |

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Computer konkret AG. Diese sind verfügbar unter [www.ivoris.de/agb](http://www.ivoris.de/agb).

Computer konkret AG  
DentalSoftwarePower  
Theodor-Körner-Straße 6  
08223 Falkenstein

Tel.: 03745 7824-33  
Fax: 03745 7824-633  
info@ivoris.de  
www.ivoris.de

Vorstand  
Dipl.-Ing. Michael Brand  
Elisabeth Brand

Amtsgericht Chemnitz  
HRB 16107  
Steuer-Nr.: 223 100 00020  
USt.Id.-Nr.: DE 197042828

SEB Bank Frankfurt  
IBAN: DE46 5122 0200 0070 9310 07  
BIC: ESSEDEFFXXX

praxis  
upgrade