

## Installation **ivoris® dent**, **ivoris® ortho** auf einem neuen Windows-Client

### Ablauf:


1. Herstellung der Systemvoraussetzungen
2. Installation **ivoris® dent**, **ivoris® ortho** über „clientsetup.exe“
3. Optional: Einrichten der Wordkopplung Lokale Einstellungen im Programm
4. Optional: Einrichten der Kopplung zu digitalen Röntgensystemen
5. Optional: Einstellung Scanner Einstellungen für Chipkartenlesegerät
6. Optional: Kopplung weiterer externer Programme

### Herstellung der Systemvoraussetzungen (1.)

- Windows 8 und Windows 7 professional – Hierbei müssen keine zusätzlichen Windowskomponenten vorinstalliert werden. Evtl. noch fehlende Komponenten werden automatisch nachinstalliert.
- Windows XP professional (ab 01/2014 nicht mehr unterstützt) – Bei Windows XP professional muss der Windows-Installer 4.5 , Net-Frame-Work 3.5.1, Net-Frame-Work 4.0 vorinstalliert werden.

### Installation **ivoris® dent**, **ivoris ortho** über „clientsetup.exe“ (2.)

- Auswahl des Praxiservers über das Netzwerk bzw. die Netzwerkumgebung der neuen Arbeitsstation.
- Start der Installation über die Datei „clientsetup.exe“ (\\SERVER\PU\_CKTWHEALTH)

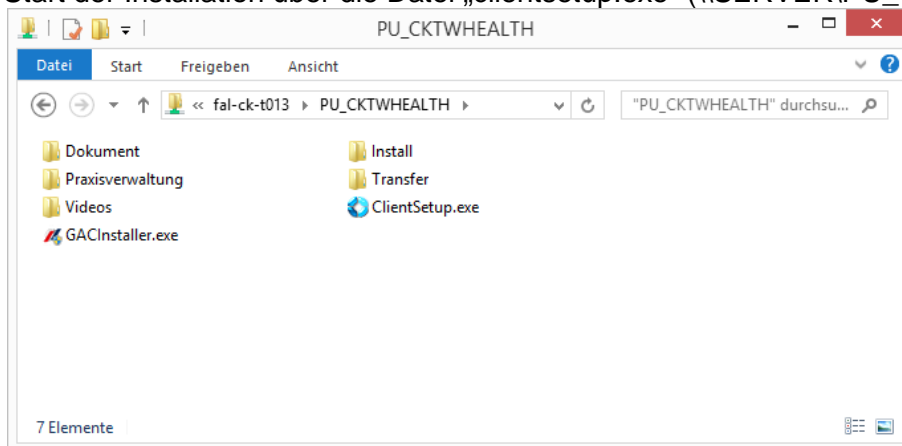

- Es wird das StartCenter von Praxis-Upgrade installiert.
- Es werden alle Programmclients, die für Praxis-Upgrade auf dem Server installiert wurden automatisch ins StartCenter eingefügt. **Ivoris®** kann dann über die entsprechende Verknüpfung im StartCenter gestartet werden.



- Sie müssen über Installationsrechte verfügen.
- (Die Datei "clientsetup.exe" kann sich bei älteren Installationen auch noch in der Server-Freigabe "PRAXIS\STOMAWIN" befinden.)

### Einrichtung der Wordkopplung in ivoris® dent, ivoris® ortho (3.)

- Start von ivoris® ortho bzw. ivoris® dent über das StartCenter
- Installation der Wordkopplung über den Menüpunkt „Update/Wordkopplung einrichten“ oder durch Klick auf das Wordicon.
- Microsoft Word (ab Word 2007, empf. Word 2013) muss installiert sein. (-> 32-bit-Version)

#### Lokale Einstellungen im Programm (4.)

- Bildanzeige im Karteiblatt (nur wenn ivoris®analyze installiert ist) – Klick mit rechter Maustaste auf die Bildplatzhalter (oben links) und Einstellung der gewünschten Bildart unter „Bild aus Diagnostikprogramm anzeigen“
- Ggf. lokale Einträge für Wartezimmer unter "Einstellungen/Wartezimmer" erstellen
- Ggf. lokale Einträge für Materialwirtschaft unter "Einstellungen/Materialwirtschaft erstellen
- Ggf. Lesegerät unter "Einstellungen/Allgemein/Chipkarte lesen" einstellen
- Ggf. Kassenbuchvorgabe unter Menüpunkt „Einstellungen/Zahlungsverkehr/Kassenbücher“ einrichten

#### Einrichten von Kopplungen zu digitalen Röntgensystemen (5.)

- Je nach verwendetem digitalem Röntgensystem müssen die erforderlichen Parameter unter dem Menüpunkt „Einstellungen/Kopplungen“ eingetragen werden, wenn nicht die VDDS-Schnittstelle verwendet wird.
- Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter dem Menüpunkt „?/KFO-Handbuch“ im Kapitel „Kopplung an Röntgensysteme“.
- Ggf. können die erforderlichen Parameter auch einfach von einer anderen Station übernommen werden.
- Die Einrichtung ist u.U. nicht erforderlich, wenn die Röntgenkopplung nur an einem speziellen PC (Röntgenrechner) in der Praxis ausgeführt wird.
- Ob der entsprechende Röntgenclient an der Arbeitsstation installiert werden muss, ist von den Anforderungen der Praxis und dem jeweilig verwendeten Röntgensystem abhängig.

#### Einstellung Scanner (6.)

Dokumentenscanner können unter dem Menüpunkt „Einstellungen/Allgemein/Postbuch/Einstellungen“ ausgewählt werden.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG